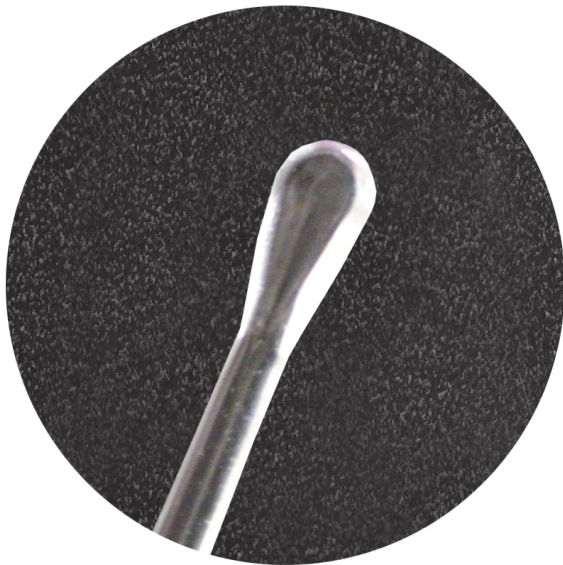




Productinformatie

De **BIONIX OORCURETTES MET VERLICHTING** - voor éénmalig gebruik - zijn een combinatie van 'Safe Oor Curescopes' met **een krachtige LED lichtbron en een vergrotingslens (loupe)**.

Deze gecombineerde functionaliteiten resulteren in een **efficiëntere en gebruiksvriendelijkere werkwijze** om cerumen op een veilige en voorzichtige manier te verwijderen.

- **de lichtbron en de loupe zijn minstens 50 keer herbruikbaar.**
- **de transparante curescopes zijn voor éénmalig gebruik.**
- de curette op de lichtbron plaatsen **activeert de verlichting**, licht schakelt automatisch uit wanneer de curette wordt verwijderd.

VERLICHTING EN LOUPE

- **helder wit LED licht** tot in het uiterste punt van de curescopes.
- de **loupe zorgt voor vergroting** - te bevestigen met een clip - waardoor het risico op beschadiging van het oorkanaal aanzienlijk wordt verminderd.
- dankzij de ingebouwde verlichting en het vergrootglas is het **niet nodig om een otoscoop als externe lichtbron te gebruiken**.
 - hierdoor heeft u één hand vrij om het hoofd of het oor van uw patiënt te positioneren.

PATIËNTENCOMFORT

- safe ear curescopes zijn gemaakt van **glad, flexibel polypropyleen**.
- ze zijn **ontworpen om te buigen** wanneer ze een obstakel tegenkomen, in tegenstelling tot harde, onbuigzame roestvrijstalen curescopes.
- **patiënt comfort**: het risico op pijn of beschadiging van de gehoorgang of het trommelvlies is nihil.
- éénmalig te gebruiken curescopes verminderen het risico op kruisbesmetting en elimineren sterilisatiekosten.

INFANTSCOOP

- ontworpen **voor kleinere oren** en kan - desgewenst - worden toegepast via een otoscoop.
- tip 2 mm.